

MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 1 PELDAÑO

RLIMP013

RLIMP013 El escabel de un peldaño es un auxiliar de acceso y postura diseñado para ayudar a pacientes y personal a alcanzar camillas, vitrinas o superficies de trabajo sin forzar la espalda ni comprometer el equilibrio. Concebido para áreas de alto tránsito (boxes, enfermería, procedimientos y aseo clínico), mantiene estabilidad y limpieza en jornadas intensivas gracias a su construcción sanitaria y superficies fáciles de desinfectar. Su huella compacta permite ubicarlo junto a camillas o mesones y retirarlo con rapidez entre atenciones, ofreciendo una alternativa segura y estandarizada frente a improvisaciones (sillas, cajas u otros elementos no aptos), en línea con las buenas prácticas de prevención de caídas.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Estructura** de acero inoxidable, resistente a la corrosión y de alta durabilidad.
- Peldaño en ABS** reforzado, de textura antideslizante y bordes redondeados para mayor seguridad.
- Tacos de goma en las patas**, que previenen el deslizamiento y protegen el piso.
- Diseño ergonómico y liviano**, ideal para uso clínico, domiciliario o institucional.
- Fácil limpieza**, compatible con productos desinfectantes hospitalarios.
- Montaje estable**, con refuerzos tubulares que proporcionan rigidez y estabilidad al soporte.



MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 1 PELDAÑO

RLIMP013

MODO DE USO:

- **Preparación del área:** verifica piso plano y seco; despeja el entorno y usa calzado antideslizante.
- **Chequeo rápido:** confirma que los topes de goma estén íntegros y la plataforma limpia y seca.
- **Posicionamiento:** acerca el escabel al punto de trabajo con toda la base apoyada; evita apoyarlo sobre uniones de piso o junto a ruedas de camilla.
- **Subida segura:** apoya todo el pie centrado en la plataforma; si requiere apoyo adicional, usa una baranda/mesa cercana.
- **Trabajo estable:** mantiene el tronco vertical; evita estirarte en exceso o cargar peso lateral que desbalancee.
- **Descenso controlado:** baja mirando el peldaño, sin saltar ni girar el cuerpo sobre la plataforma.
- **Traslado:** levanta el escabel tomando la estructura (no la plataforma) y no lo arrastres para proteger los topes y el piso.
- **Cierre:** retira residuos, desinfecta y seca antes de guardarlo en un lugar seco y ventilado.



MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 1 PELDAÑO

RLIMP013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	ESCABEL ABS 1 PELDAÑO
Código	RLIMP013
Tipo de peldaño	Único
Material de estructura	Acero inoxidable tubular de alta resistencia
Acabado	Pulido brillante, resistente a la corrosión
Material de plataforma	ABS inyectado de alta densidad, antideslizante
Textura de superficie	Relieve punteado ergonómico
Refuerzo estructural	Doble travesaño inferior de acero
Topes antideslizantes	Goma negra de alta fricción, intercambiable
Dimensiones	22,1 cm (Largo) × 41,2 cm (Ancho) × 18,5 cm (Alto)
Peso neto	1,2 kg
Capacidad de carga	Hasta 120 kg aprox.
Temperatura de trabajo	0 °C a 50 °C
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 1 PELDAÑO

RLIMP013

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

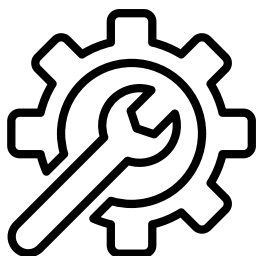

- Limpiar con paño húmedo y detergente neutro o solución desinfectante.
- Evitar productos abrasivos o solventes que puedan dañar el acabado.
- Revisar periódicamente las uniones y topes antideslizantes.
- Mantener en ambiente seco y ventilado, sin exposición prolongada a la humedad.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar solo en superficies planas y estables.
- No pararse sobre los bordes del peldaño.
- Reemplazar si presenta deformaciones, grietas o inestabilidad.
- Mantener fuera del alcance de niños cuando no esté en uso.

