

MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 2 PELDAÑOS

RLIMP001

RLIMP001 Escabel de doble peldaño es un auxiliar de acceso progresivo que facilita un ascenso y descenso más natural y estable hacia camillas, vitrinas o superficies de trabajo, reduciendo la exigencia postural y el riesgo de desequilibrios. Su diseño prioriza la asepsia y la rotación rápida entre boxes: superficies fáciles de desinfectar, geometría que se ubica sin interferir el flujo de atención y formato compacto para reubicación ágil. Es una alternativa segura y estandarizada frente a soluciones improvisadas, alineada con prácticas de prevención de caídas en entornos clínicos e institucionales.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Doble nivel** ergonómico que facilita un ascenso / descenso progresivo y estable.
- Superficie texturizada** con microrelieve y pequeños drenes que favorecen la tracción y el secado.
- Materiales sanitarios no porosos (inox + ABS)** de rápida desinfección y alta resistencia a la corrosión.
- Huella estable con refuerzos inferiores**, que reduce balanceos laterales.
- Topes de goma de alta fricción**, reemplazables, que protegen el piso y evitan desplazamientos.
- Cantos redondeados** y fijaciones embutidas, que minimizan enganches con ropa clínica.
- Mantenimiento simple**, compatible con desinfectantes de uso clínico.




MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 2 PELDAÑOS

RLIMP001

MODO DE USO:

- **Preparación:** verifica piso plano y seco, calzado antideslizante y topes íntegros - limpia la plataforma si hay humedad.
- **Posicionamiento:** ubica el escabel paralelo a la camilla, con toda la base apoyada y lejos de desniveles o ruedas móviles.
- **Subida segura:** asciende peldaño por peldaño, de frente, apoyando todo el pie centrado; usa la baranda o camilla como apoyo si es necesario.
- **Durante el uso:** mantén tronco vertical - evita giros sobre el peldaño y cargas laterales que desbalancen.
- **Descenso y traslado:** desciende mirando el peldaño - para moverlo, levántalo desde la estructura (no lo arrastres).
- **Cierre:** desinfecta y seca - guarda en lugar seco/ventilado y revisa periódicamente tornillería y topes.

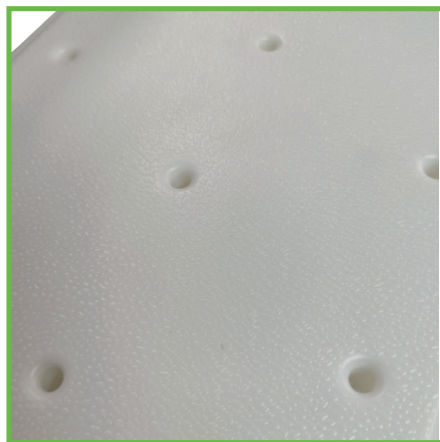

MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 2 PELDAÑOS

RLIMP001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	ESCABEL ABS 2 PELDAÑO
Código	RLIMP001
Configuración	2 peldaños
Dimensiones 1er peldaño	22,1 cm (Largo) × 41,2 cm (Ancho) × 18,5 cm (Alto)
Altura al 2º peldaño / base	33 cm
Dimensiones conjunto	50,5 cm (Largo total) x 41,2 cm (Ancho)
Peso neto	2,5 kg
Estructura	Acero inoxidable tubular (acabado pulido)
Superficie de peldaños	ABS inyectado de alta densidad con microrelieve y puntos de drenaje (agarre y fácil limpieza)
Refuerzos	Traviesas inferiores de rigidización
Topes	Goma de alta fricción, reemplazables
Capacidad de carga	Hasta 120 kg aprox.
Condición de uso	Clínico / institucional / domiciliario asistencial
Temperatura de trabajo	0 °C a 50 °C
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

ESCABEL ABS 2 PELDAÑOS

RLIMP001

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

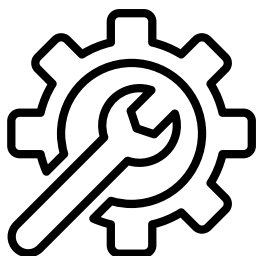

- Limpiar con paño húmedo y detergente neutro o solución desinfectante.
- Evitar productos abrasivos o solventes que puedan dañar el acabado.
- Revisar periódicamente las uniones y topes antideslizantes.
- Mantener en ambiente seco y ventilado, sin exposición prolongada a la humedad.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar solo en superficies planas y estables.
- No apoyar el peso en bordes del peldaño ni usar como escalera múltiple.
- Retirar del servicio ante fisuras, juego estructural o inestabilidad.
- Mantener fuera del alcance de niños cuando no esté en uso.

