

RESCATE Y EMERGENCIA COLLAR CERVICAL INFANTIL

AJUSTABLE · 3 POSICIONES

RL398

RL398 El Collar Cervical Infantil es un dispositivo de inmovilización cervical diseñado para apoyar la atención y el traslado de pacientes pediátricos. Su estructura ajustable facilita el calce dentro del rango infantil y contribuye a mantener una alineación segura de cabeza y cuello en contextos prehospitalarios, rescate y urgencias.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Sistema ajustable por posiciones:** permite adaptar la altura del collar dentro del rango infantil, según la talla requerida.
- Bloqueo bilateral:** incorpora un mecanismo de fijación lateral que asegura la posición seleccionada para mantener el ajuste.
- Soporte de mentón anatómico:** proporciona un apoyo anterior estable y mejora el calce.
- Panel posterior estructurado:** mejora la contención posterior y la estabilidad del conjunto.
- Preformable antes de instalar:** permite dar forma previa al collar para optimizar el calce al contorno del cuello.
- Cierre regulable tipo velcro:** facilita el aseguramiento final una vez colocado.
- Compatible con rayos X, TAC y resonancia magnética:** permite realizar estudios de imagen con el collar colocado, sin necesidad de retirarlo, según protocolo clínico.



**COMPATIBLE CON
RAYOS X · TAC · RM**

Dimensiones	48 × 12,5 cm
Peso	63 g aprox.
Código	RL398



RESCATE Y EMERGENCIA COLLAR CERVICAL INFANTIL

AJUSTABLE · 3 POSICIONES

RL398

MODO DE USO

1

1. Medir al paciente

Alinear la cabeza en posición neutra (mirada al frente), salvo contraindicación por protocolo, y medir la referencia hombro a mentón para definir la altura o talla.

2

2. Ajustar la talla del collar

Seleccionar la posición correspondiente dentro del tallaje pediátrico. Orientar el borde plástico hacia el orificio o hacia el poste negro si ya está ensamblado.

3

3. Bloquear el collar

Presionar las dos pestañas laterales para asegurar ambos lados y confirmar que la posición quede firme y bloqueada.

4

4. Moldear / preformar

Dar forma al collar antes de colocarlo para adaptar mejor el contorno del cuello y facilitar la instalación.

5

5. Colocar y asegurar

Posicionar el soporte de mentón bajo el mentón, sostener la cabeza en neutro y ajustar el panel posterior hasta cerrar el velcro.



RECOMENDACIONES DE USO

- Uso exclusivo por personal capacitado.
- No ajustar la talla directamente en el paciente si puede evitarse; prepárela previamente.
- Verifique el bloqueo bilateral antes del traslado.
- Mantenga siempre el control manual de la cabeza hasta finalizar la inmovilización.

RESCATE Y EMERGENCIA

COLLAR CERVICAL

INFANTIL

AJUSTABLE · 3 POSICIONES

RL398

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	Collar cervical infantil ajustable
Código	RL398
Configuración de ajuste	3 posiciones
Material estructural	Polímero rígido higienizable compatible con desinfectantes hospitalarios
Sistema de bloqueo	Pestañas bilaterales de enclavamiento manual
Sistema de cierre	Banda velcro frontal (ajuste rápido)
Resistencia	Estructura estable ante torsión y flexión moderada
Compatibilidad	Uso conjunto con inmovilizador de cabeza pediátrico RL320 y tabla espinal pediátrica RL327
Compatibilidad imagenológica	Compatible con rayos X, TAC y resonancia magnética
Almacenamiento	Guardar extendido/plano, protegido del sol y deformaciones
Dimensiones (expandido)	48 cm (ancho) × 12,5 cm (alto)
Peso del producto	63 gramos
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




RESCATE Y EMERGENCIA COLLAR CERVICAL INFANTIL

AJUSTABLE · 3 POSICIONES

RL398

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

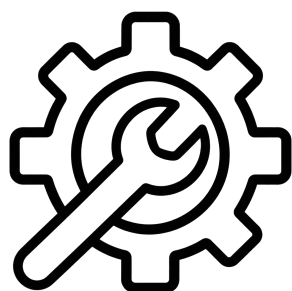

- Limpieza con paño suave y detergente neutro.
- Desinfección con productos de uso clínico compatibles con polímeros, según protocolo del establecimiento.
- Secar completamente antes de almacenar.
- Revisar el estado de las pestañas y velcros antes de cada uso.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Uso exclusivo por personal capacitado.
- La inmovilización debe realizarse según protocolo local, evitando movimientos de columna.
- No ajustar el collar en el paciente; ajustar previamente la talla o posición.
- No almacenar doblado; guardar extendido o plano para evitar deformaciones.
- Compatible con rayos X, TAC y resonancia magnética; permite estudios de imagen sin retirar el collar, según protocolo clínico.

