

OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO D – PIN INDEX

(OXÍGENO)

RL206

RL535 El Cilindro de Oxígeno Tipo D con conexión Pin Index está diseñado para entregar portabilidad y seguridad, siendo una alternativa práctica para usuarios que requieren transportar su suministro personal de forma frecuente, así como para uso en entornos domiciliarios, clínicos y de emergencia, facilitando la continuidad del tratamiento y la respuesta en terreno.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Portabilidad para uso continuo:** pensado para usuarios y equipos que necesitan trasladar oxígeno de forma frecuente, manteniendo el suministro siempre disponible.
- **Estructura liviana y robusta:** fabricado en aleación de aluminio resistente a la presión, adecuada para exigencias de uso clínico y prehospitalario.
- **Conexión Pin Index (tipo yugo):** sistema estandarizado que permite un acople seguro con reguladores compatibles, facilitando una operación rápida y ordenada.
- **Operación práctica en terreno:** diseño que favorece una manipulación controlada al conectar y retirar accesorios durante la atención.
- **Traslado versátil:** compatible con carro de transporte o bolso, adaptándose a rutinas domiciliarias, clínicas o de emergencia.
- **Uso en distintos entornos:** apropiado para oxigenoterapia en hogar y apoyo en centros clínicos, ambulancias y rescate.
- **Identificación visual del equipo:** cúpula blanca y cuerpo aluminio (según unidad), facilitando su ubicación dentro del set de oxigenoterapia.
- **Trazabilidad y control:** marcados visibles en el cilindro (según unidad) para inventario, control interno y mantenciones.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO C / M9

(OXÍGENO)

RL535

MODO DE USO

- **Inspección previa:** verificar integridad del cilindro, estado general, válvula limpia y sin daño visible.
- **Asegurar el cilindro:** mantenerlo estable en soporte/bolso para evitar golpes o caídas.
- **Conectar regulador compatible:** instalar según el manual del regulador y confirmar ajuste correcto.
- **Apertura controlada:** abrir la válvula de forma gradual y comprobar ausencia de fugas.
- **Operación clínica:** ajustar el suministro según indicación profesional y monitorear el consumo.
- **Cierre y desconexión:** cerrar la válvula, despresurizar el regulador si corresponde y retirar accesorios.



OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO C / M9

(OXÍGENO)

RL535

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CILINDRO TIPO C / M9
Código	RL535
Gas	Oxígeno
Capacidad	246 L / 8,7 cu ft
Presión de servicio	2015 psi
Material	Aleación de aluminio 6061-T6
Peso (vacío)	2 kg
Dimensiones	Alto: 36 cm / Diámetro: 12 cm
Largo total	< 40,6 cm
Válvula	CGA-870 con Toggle
Acabado/Color:	Cúpula blanca y cuerpo en aluminio (acabado metálico).
Identificación del gas	Oxígeno (O ₂), identificado por rotulación/marcado del cilindro.
Procedencia	EE.UU.
Marca	RescateLife
Certificación	CE - DOT (EE.UU.)
Garantía	12 meses

* No incluye carga. Indicar en la cotización si se requiere el cilindro con carga.




OXÍGENO TERAPIA

CILINDRO TIPO C / M9

(OXÍGENO)

RL535

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

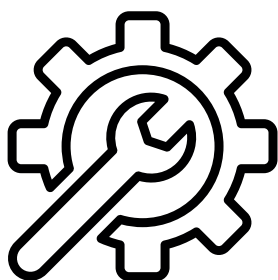

- Limpieza exterior con paño suave y detergente neutro; secar completamente.
- Evitar productos abrasivos o solventes agresivos.
- Mantener válvula y conexiones libres de polvo/partículas.
- Realizar inspecciones periódicas conforme a protocolo interno y normativa aplicable.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Mantener alejado de fuentes de calor, llamas o chispas.
- No fumar durante su uso o manipulación.
- No utilizar aceites, grasas o lubricantes en válvula/reguladores (riesgo de ignición).
- Transportar siempre asegurado para evitar golpes y caídas.
- Almacenar en lugar ventilado, seco y protegido.

