

LÍNEA INSTRUMENTAL

TIJERA CURVA

AGUDA / AGUDA 14 CM

RLI214

RLI214 La tijera curva aguda/aguda es un instrumento de corte de uso general en procedimientos clínicos y quirúrgicos menores. Su diseño con puntas agudas y curvatura distal favorece cortes precisos y controlados, permitiendo acceder a planos profundos o zonas de difícil alcance sin comprometer el campo de visión. Es utilizada habitualmente por el instrumentista o ayudante para recortar suturas, gasa y drenajes, además de apoyar maniobras de disección fina. Fabricada en acero inoxidable, resiste ciclos repetidos de reprocesamiento y ofrece una superficie lisa de fácil higiene.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Curvatura distal** que mejora el alcance y la visibilidad en cavidades o áreas anguladas.
- **Puntas aguda/aguda** para cortes finos y precisos en tejido y suturas.
- **Corte estable** gracias a su pivote central y hojas alineadas.
- **Anillos simétricos** para un agarre seguro y ergonomía estándar.
- **Superficie lisa** con acabado satinado para fácil limpieza y menor reflejo.
- **Esterilizable** por métodos hospitalarios comunes (vapor, gas o radiación) según protocolo.
- **Uso multipropósito:** corte de gasa, drenajes y material de sutura; apoyo en disección controlada.



LÍNEA INSTRUMENTAL

TIJERA CURVA

AGUDA / AGUDA 14 CM

RLI214

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	TIJERA CURVA AGUDA/AGUDA 14 CM
Código	RLI214
Modelo / Variante	14 cm (Largo total del instrumento)
Tipo de punta	Aguda/Aguda
Curvatura	Distal (curva)
Mecanismo de articulación	Tornillo / pivote
Tipo de agarre	Anillos simétricos
Peso del producto	41 Gramos
Material principal	Acero inoxidable
Acabado	Satinado / Superficie lisa
Métodos de esterilización compatibles	Vapor (autoclave); Gas (óxido de etileno, plasma H ₂ O ₂); Radiación ionizante
Compatibilidad / Uso	Corte de suturas, gasa y drenajes; apoyo en disección fina
Procedencia	Pakistán
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	6 meses




LÍNEA INSTRUMENTAL

TIJERA CURVA

AGUDA / AGUDA 14 CM

RLI214

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

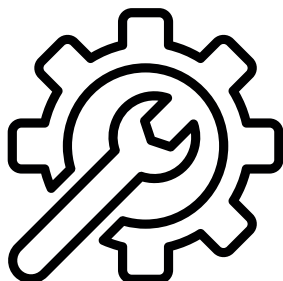

- Realizar pre-lavado inmediato tras el uso para evitar fijación de proteínas.
- Limpieza manual con detergente enzimático pH neutro; cepillado suave de bisagras y filos.
- Enjuague con agua desmineralizada; secado completo para prevenir corrosión.
- Lubricación del pivote con aceite para instrumental si lo exige el protocolo.
- Esterilización por método aprobado (ver tabla). Almacenar en lugar seco y protegido.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Transportar y almacenar con puntas protegidas para evitar daños o incidentes.
- No usar si se observan mellas, deformaciones o juego excesivo en el eje.
- Refilado/calibración por servicio técnico especializado cuando sea necesario.