

RESCATE Y EMERGENCIA

## BOLSO TRASLADO

DE VACUNAS BAGLIFE

### BL104

**BL104 El Bolso Traslado de Vacunas BAGLIFE** es un contenedor isotérmico portátil diseñado para mantener la cadena de frío de vacunas, medicamentos y material biológico durante traslados en terreno. Su estructura reforzada, interior aislado y organización modular permiten transportar el contenido de forma segura, ordenada y con control permanente de la temperatura.

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Bolso isotérmico para cadena de frío:** diseñado para el traslado seguro de vacunas, medicamentos y material biológico, ayudando a mantener la temperatura estable durante el recorrido.
- **Interior acolchado tipo caja:** cavidad interna rígida con revestimiento aluminizado y divisores acolchados desmontables, que permiten sectorizar frascos, ampollas y acumuladores de frío según el protocolo de uso.
- **Organización externa para insumos:** bolsillo frontal organizador con malla y elásticos para material de acceso rápido, más compartimientos en tapa y laterales para insumos adicionales y documentación.
- **Monitoreo permanente de temperatura:** visor frontal con termómetro digital que permite controlar la temperatura interna sin necesidad de abrir el bolso.
- **Transporte cómodo y seguro:** asas superiores acolchadas que se unen con velcro, correa de hombro regulable con hombrera y base rígida con patas que protegen el bolso del suelo. En la parte posterior incorpora bolsillo plano y porta credencial con zona reflectante para una rápida identificación en terreno.



RESCATE Y EMERGENCIA

## BOLSO TRASLADO

DE VACUNAS BAGLIFE

BL104

### MODO DE USO:

#### Preparación del bolso

- Verificar que el interior esté limpio, seco y en buen estado.
- Colocar los acumuladores de frío previamente acondicionados según el protocolo institucional

#### Organización del contenido

- Distribuir vacunas y medicamentos en los compartimientos internos, evitando el contacto directo con los acumuladores de frío.
- Utilizar los divisores acolchados para separar tipos de insumos y prevenir movimientos bruscos

#### Cierre y transporte

- Cerrar el compartimiento principal y los bolsillos externos asegurando bien los cierres.
- Ajustar la correa de hombro o utilizar las asas superiores según la forma de traslado requerida.

#### Monitoreo durante el traslado

- Revisar periódicamente el visor de temperatura para confirmar que se mantenga dentro del rango definido por las normas de la institución o autoridad sanitaria.



RESCATE Y EMERGENCIA

**BOLSO TRASLADO**

DE VACUNAS BAGLIFE

BL104

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| SECCIÓN                                | ESPECIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                            | BOLSO TRASLADO DE VACUNAS BAGLIFE                                                                                                                                                                                                                              |
| Código                                 | BL104                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiales                             | Exterior: tela EVA con recubrimiento PU, resistente al desgaste, humedad y suciedad. / Interior: revestimiento aluminizado con aislamiento térmico y estructura acolchada tipo caja.                                                                           |
| Color y señalización                   | Rojo con detalles grises y cintas reflectantes de alta visibilidad                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones y volumen útil             | 31 cm (Largo) x 48 cm (Ancho) X 31,5 (Alto) Volumen geométrico útil interno aprox.: 21,6 L (considerando 4 cm de acolchado por lado).                                                                                                                          |
| Peso                                   | 1,5 kilos aprox                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distribución interna y compartimientos | Compartimiento principal isotérmico con divisores acolchados desmontables para organizar vacunas y biológicos. Bolsillo frontal con malla y elásticos, laterales amplios con tapa y velcro, bolsillo superior transparente y trasero plano para documentación. |
| Control de temperatura                 | Termómetro digital frontal para monitoreo sin abrir el bolso.                                                                                                                                                                                                  |
| Transporte y soporte                   | Asas superiores acolchadas unidas con velcro, correa de hombro ajustable con hombrera y base rígida con patas antideslizantes.                                                                                                                                 |
| Cierre y protección                    | Cierres de alta resistencia con tiradores ergonómicos.                                                                                                                                                                                                         |
| Identificación                         | Porta credencial posterior                                                                                                                                                                                                                                     |
| Procedencia                            | Importación directa                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marca                                  | RescateLife / BagLife                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificación                          | CE – ISO13485                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Garantía                               | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                       |

\* Se comercializa vacío, sin insumos médicos incluidos




RESCATE Y EMERGENCIA

## BOLSO TRASLADO

DE VACUNAS BAGLIFE

BL104

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

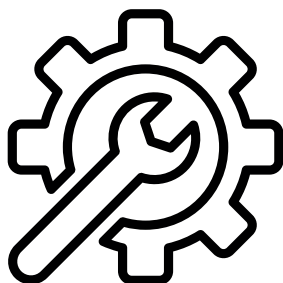

- Limpiar el interior con paño suave y solución jabonosa neutra; secar completamente antes de volver a cerrar el bolso.
- No utilizar solventes, cloro puro ni elementos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento interno o las cintas reflectantes.
- Revisar periódicamente el estado de los cierres, correas y divisores; reemplazar piezas dañadas para mantener la seguridad del contenido.
- Guardar el bolso vacío, limpio y con los cierres cerrados, en un lugar seco y protegido de la luz solar directa.

### CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No sobrepasar la capacidad interna ni el peso recomendado para evitar deformaciones y fallas en las costuras.
- Evitar golpes fuertes, caídas o contacto prolongado con superficies cortantes que puedan perforar el material aislante.
- No colocar fuentes de calor directo (estufas, radiadores, maleteros muy expuestos al sol) que puedan alterar la temperatura interna o dañar el aislamiento.
- Verificar siempre la temperatura mediante el visor y registrar los valores según los procedimientos de control de cadena de frío del servicio.

