

EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800


RLEM1800 Los **PEDI-PADZ® II** son electrodos pediátricos diseñados para su uso con los desfibriladores ZOLL AED Plus, ofreciendo una terapia segura y adaptada a niños de hasta 8 años o 25 kg de peso.

Integran algoritmos específicos para ritmo cardíaco infantil, que permiten al equipo reducir automáticamente la energía de descarga y ofrecer una terapia de desfibrilación pediátrica precisa y controlada.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Diseño pediátrico especializado**, con energía ajustada automáticamente por el equipo según el peso y edad del paciente.
- **Indicaciones visuales en el empaque**, que facilitan la colocación correcta de los parches.
- **Comunicación automática con el desfibrilador**: el dispositivo reconoce los electrodos pediátricos y activa las instrucciones de voz y texto adecuadas.
- **Algoritmos exclusivos de análisis pediátrico**, que optimizan la identificación de ritmos desfibrilables en niños.
- **Compatibilidad profesional ampliada**: también operan con desfibriladores hospitalarios ZOLL R Series®, Propaq® MD y X Series®, lo que permite continuidad en la atención.
- **Material adhesivo hipoalergénico y flexible** que garantiza contacto estable durante la reanimación.

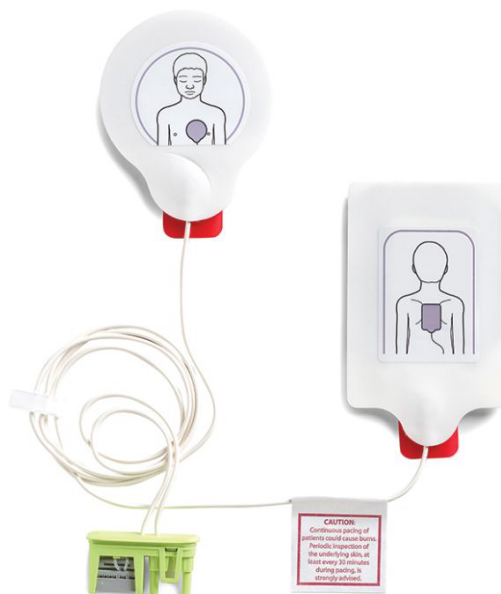

EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO ZOLL AED PLUS
Código	RLEM1800
Tipo de paciente	Pediátrico (≤ 8 años / ≤ 25 kg)
Tipo de uso	Desechable, un solo uso
Compatibilidad DEA	AED Plus®, AED Pro®, ZOLL AED 3®, AED 3 BLS®
Compatibilidad profesional	R Series®, Propaq® MD, X Series®, X Series Advanced
Tipo de conexión	Conector verde AED ZOLL
Pre-conexión	Sí
Cable conductor	Longitud 31,75" (≈ 80 cm) / 13,00" (≈ 33 cm) según modelo
Forma almohadilla frontal	Redonda 4,52 " $\times$ 3,70 " / área 17 in ² / gel círculo 2,85 " (área 6,4 in ²)
Forma almohadilla esternón-espalda	Rectangular 4,81 " $\times$ 3,47 " / área 17 in ² / gel 3,58 " $\times$ 2,18 " (área 7,8 in ²)
Contenido del paquete	1 par de electrodos PEDI-PADZ® II (pediátrico), Manual ilustrado de colocación, Cable preconectado verde ZOLL, Sobre estéril con sellado individual
Procedencia	EE. UU
Marca	ZOLL Medical Corporation
Certificación	FDA / CE / ISP DM 620/24
Garantía	2 años desde la fecha de fabricación




EQUIPOS MEDICOS

PEDI-PADZ® II PARCHE PEDIATRICO

ZOLL AED PLUS

RLEM1800

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

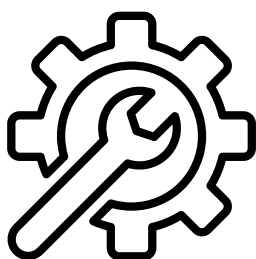

- Mantener sellado y protegido de la luz solar directa.
- No reutilizar tras su aplicación o uso en entrenamiento.
- Verificar la fecha de caducidad antes de instalar en el equipo.
- Conservar en ambiente seco entre 0 °C y 50 °C, humedad ≤ 95 % sin condensación.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Utilizar exclusivamente con equipos ZOLL AED Plus o modelos compatibles.
- No aplicar sobre piel lesionada ni húmeda.
- Garantizar que el paciente no esté en contacto con superficies metálicas durante la descarga.
- Desechar de acuerdo con las normativas vigentes de residuos biológicos.

