

LÍNEA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS **BAÑO PORTÁTIL** PLEGABLE

RL794

Sanitario portátil plegable RL794 con apoyabrazos y respaldo, diseñado para asistir la higiene de personas con movilidad limitada (postoperatorios, lesiones, adultos mayores o discapacidad), tanto al costado de la cama como dentro del baño/ducha. Incorpora tapa, recipiente (cubo) de residuos con asa, y altura regulable para mejorar seguridad, comodidad y autonomía del usuario.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Plegable:** se abre y se pliega fácilmente para transporte/almacenaje.
- **Altura regulable** en 5 niveles (ajuste de 74 a 84 cm).
- **Apoyabrazos** y respaldo para soporte adicional.
- **Cubo de inodoro grande** con tapa y asa, fácil de extraer y limpiar.
- **Asiento y tapa plásticos** de alta densidad, montaje a presión.
- **Estructura** de acero soldado con recubrimiento en polvo (resistente, estable y antiderrapante).
- **Regatones** (puntas) de goma antideslizantes en las patas.
- **Uso en baño/ducha:** materiales resistentes al agua y óxido.



LÍNEA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
BAÑO PORTÁTIL
PLEGABLE

RL794

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	Baño Portátil Plegable
Código	RL794
Peso neto producto (aprox)	6 kg
Dimensiones del producto	49 cm (Largo) x 53 cm (Ancho)
Altura regulable	74 – 84 cm (5 niveles).
Carga máxima	120 kg.
Con apoyabrazos	Sí (plásticos antideslizantes).
bandeja/ recipiente de contención	Sí (extraíble con asa)
accesorios incluidos	Estructura plegable con respaldo y apoyabrazos, Asiento y tapa plásticos (montaje a presión), Recipiente (cubo) con asa y tapa, Regatones de goma antideslizantes instalados.
Materiales	Estructura: acero soldado con recubrimiento en polvo (resistente al agua/óxido), Asiento, tapa y recipiente: plástico de alta densidad, Apoyabrazos: plásticos antideslizantes (gris), Patas: regatones de goma antideslizantes
Dimensiones del embalaje	74 cm (Largo) x 54 cm (Ancho) x 28 cm (Alto)
Marca	Rescate Life
Garantía	6 meses



LÍNEA PRODUCTOS ORTOPÉDICOS
BAÑO PORTÁTIL
PLEGABLE

RL794

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

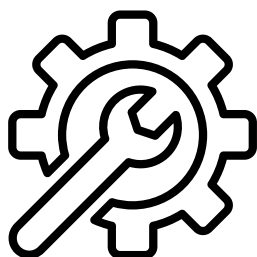

- Después de cada uso: vaciar el recipiente, lavar con agua y detergente neutro - desinfectar con solución clorada o alcohol al 70 % compatible con plásticos) y secar.
- Estructura y apoyabrazos: limpiar con paño húmedo y detergente neutro - no usar solventes abrasivos.
- Regatones: revisar periódicamente desgaste/adhesión; reemplazar si están dañados.
- Guardar seco y ventilado - evitar exposición prolongada a humedad o sol directo.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Verificar estabilidad antes de cada uso (todas las patas apoyadas, sin juego).
- No exceder la carga máxima de 120 kg.
- Ajustar la altura a una posición que permita apoyar los pies y levantarse sin esfuerzo excesivo.
- Usar calzado antideslizante; si se emplea en ducha, considerar alfombra antideslizante adicional.
- Revisar pernos/encastres y el cierre a presión del asiento/tapa - no usar si hay piezas sueltas o rotas.
- Mantener fuera del alcance de fuentes de calor directas o químicos que dañen los plásticos.

