

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO

ALTA ESPECIALIDAD


RLIMP006

RLIMP006 Carro de paro para alta complejidad, para reanimación y áreas críticas, construido con materiales sanitarios de fácil desinfección y diseño ergonómico. Incorpora cubierta superior con borde antiderrame y rodajes hospitalarios de 5" con freno para maniobras precisas. Su configuración modular reúne cajonería de extracción suave con separadores, bandeja retráctil de preparación y accesorios clave (bandeja para monitor, porta-suero, soporte para cilindro de O₂, basureros y porta-papeles), permitiendo un set de RCP listo y seguro con cierre a llave y precintos.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Flujo por zonas:** organización lógica para vía aérea, fármacos, monitorización y acceso vascular.
- Acceso controlado:** cierre con llave y precintos visibles para auditoría y reposición segura.
- Puesto de trabajo seguro:** cubierta con contención perimetral y bandeja retráctil que amplía la superficie de preparación.
- Orden modular:** cajonería de deslizamiento suave con separadores reconfigurables y porta-etiquetas frontales.
- Equipamiento crítico:** bandeja para monitor/ desfibrilador con correas y mástil porta-suero junto al lado de trabajo.
- Oxígeno integrado:** soporte con sujeción rápida que mantiene estable el cilindro durante el traslado.
- Residuos y punzocortantes:** contenedores laterales con tapa y depósito dedicado, fuera del plano limpio.

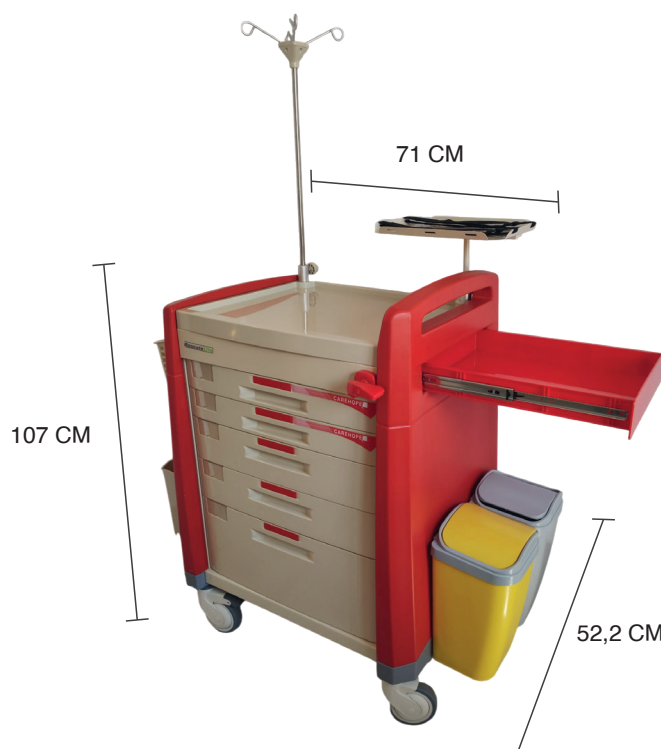

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO

ALTA ESPECIALIDAD

RLIMP006

- **Movilidad precisa:** rodajes hospitalarios con freno de estacionamiento y agarraderas ergonómicas de empuje.
- **Documentación y energía:** porta-papeles y canasto utilitario a la vista; regleta integrada con guiado ordenado de cables.

MODO DE USO:

- **Posicione, active frenos** y verifique energía disponible en la regleta.
- **Disponga por zonas** (vía aérea, fármacos, acceso vascular, desfibrilación) usando separadores.
- **Fije monitor/desfibrilador** en la bandeja porta-monitor; conecte solo los equipos necesarios.
- **Use la bandeja retráctil** para preparación/ medicación y el porta-papeles para órdenes y registro.
- **Al finalizar,** reponga, realice control de vencimientos y selle con guinchas.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO

ALTA ESPECIALIDAD

RLIMP006

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO DE PARO ALTA ESPECIALIDAD
Código	RLIMP006
Dimensiones generales	71 cm (Ancho) × 52,2 cm (Largo) × 107 cm (Alto con agarradera).
Materiales de construcción	Cuerpo en ABS sanitario; refuerzos metálicos. Accesorios: porta-suero (acero + aluminio + plástico), bandeja porta-monitor metálica esmaltada, soporte de cilindro O ₂ metálico con correa de velcro.
Rodajes	4 ruedas hospitalarias de 5": 2 con freno + 2 libres (giro 360°).
Cajonería (5)	2 Pequeños 55 ancho x 40 largo x 6,5 alto / 2 Medianos 55 ancho x 40 largo x 9,5 alto / 1 Grande 55 ancho x 40 largo x 16,3 alto. Guías Telescópicas De Extracción Suave.
División interna	Separadores incluidos: 9 pzs 51,5 × 9 cm; 9 pzs 36,2 × 9 cm; 6 pzs 36,2 × 5,5 cm; 6 pzs 51,5 × 5,5 cm.
Superficies de trabajo	Cubierta superior 53,3 × 39,5 × 2,5 cm con borde; bandeja retráctil 33,3 × 44,3 × 6,2 cm (con fondo); bandeja porta-monitor 37 × 29 × 2,2 cm con correas.
Accesorios integrados	Porta-suero de 4 ganchos; 2 basureros; canasto lateral 34 × 18,3 × 15 cm; porta-papeles 41 × 15,5 × 23,5 cm; porta-tarjetas por bandeja; Zapatilla múltiple de 4 salidas
Seguridad	Cerradura con llave + 20 guinchas de seguridad; soporte para cilindro O ₂ con base y correa de velcro; manilla lateral de empuje.
Peso	49 kg aprox (producto) –52 kg aprox (con embalaje)
Procedencia	Importación directa
Marca	RescateLife
Certificación	CE
Garantía	12 Meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO DE PARO

ALTA ESPECIALIDAD

RLIMP006

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

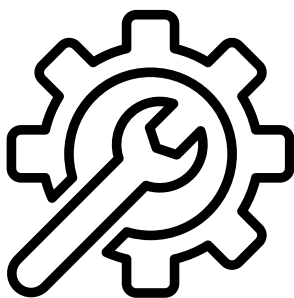

- Limpieza posuso: detergente enzimático + desinfectante compatible con ABS/metál; secado inmediato.
- Semanal: revisión de frenos, apriete de herrajes, limpieza y lubricación ligera de rieles de cajones.
- Mensual: chequeo visual de cable/regleta y estado de correas (monitor y O₂); reemplazar si hay desgaste.
- Mantener rodajes libres de gasas, cintas o restos que limiten el giro.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Estandarizar layout y checklist del carro (etiquetas visibles por cajón).
- Evitar sobrecargar la bandeja superior y la retráctil; priorizar equipos esenciales.
- Traslado siempre por las agarraderas; no tirar del mástil ni del porta-monitor.
- Resguardar el carro en área designada, con frenos activados y precintado luego de cada control.

