

LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

LED 9W ECO

RL504

La RL504 es una lámpara de examen LED de pedestal con cuello flexible, diseñada para procedimientos menores y evaluaciones ambulatorias en consultorios (ORL/ENT, ginecología-obstetricia, kinesiología/fisioterapia, dermatología y estética). Entrega luz blanca clínica, estable y regulable, con baja emisión de calor y operación sencilla, ideal para posicionar el haz con precisión en box o sala de procedimientos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **LED 9 W** con 30.000 lux @ 30 cm y 6500 K (blanco clínico).
- **Regulación de brillo** mediante caja dimmer en la columna.
- **Cuello flexible** para direccionamiento fino del haz.
- **Base de 5 ruedas con freno:** movilidad y estabilidad.
- **Instalación rápida** y mantenimiento sencillo.



LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

LED 9W ECO

RL504

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	LAMPARA CUELLO FLEXIBLE LED 9W ECO
Código	RL504
Fuente luminosa	LED 9 W · 30.000 lux a 300 mm · Temperatura de color 6500 K · Vida útil ≥ 50.000 h
Alimentación / Control	CA 220–240 V, 50/60 Hz · caja reguladora (dimmer))
Dimensiones – Conjunto	Tubo rígido regulable: 65–99 cm. Altura regulable (piso + cabezal): 1155–203 cm
Dimensiones – Componentes	Cuello flexible: 54 cm - Cabezal: Ø 7,80 cm (C = 24,5 cm)
Base	Estrella 5 ruedas · Separación entre patas adyacentes: 32 cm (centro a centro) · Diámetro de base calculado: 54,44cm cm
Peso neto producto	3,8 kg
Dimensiones del embalaje	95 cm (Largo) x 50 cm (Ancho) x 10 cm (Alto)
Peso del embalaje	4,7 kg
Procedencia	China
Marca	Rescate Life
Garantía	6 meses




LÍNEA MUEBLES CLÍNICOS

LAMPARA CUELLO FLEXIBLE

9 W LED

RL953

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

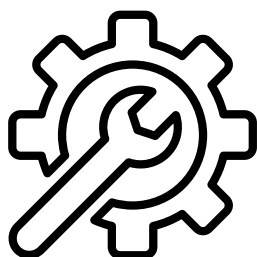

- Apagar y desenchufar antes de limpiar
- Paño suave con detergente neutro (sin solventes/abrasivos ni sprays directos).
- Retire polvo de columna/base/ruedas y verifique tornillos y cable.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Evite golpes, caídas y humedad; active frenos durante el uso.
- No mirar la luz directamente; regule con dimmer y oriente con el cuello.
- Guiar el cable para que no se pise ni se atore; usar tomacorriente en buen estado.
- Asegurar área libre para el giro de la base de 5 ruedas.

