

MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PORTA MONITOR

RLPROD655

RLPROD655 Soporte móvil tipo pedestal diseñado para trasladar y posicionar monitores multiparámetros o de signos vitales junto con sus accesorios. Su chasis metálico y base de cinco radios ofrecen estabilidad en pasillos y boxes clínicos, mientras que el canasto lateral permite mantener cables, brazaletes y fuentes de poder ordenados durante la atención.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Base de 5 ruedas de alto tránsito**, giro 360°; 2 con freno para bloqueo seguro.
- **Bandeja superior** para el monitor, de fácil acceso al panel frontal.
- **Canasto lateral integrado** para accesorios y consumibles.
- **Manilla con empuñadura de goma** para traslado cómodo y controlado.
- **Estructura metálica** con acabado resistente al uso hospitalario.



MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PORTA MONITOR

RLPROD655

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CARRO PORTA MONITOR
Código	RLPROD655
Altura total	91 cm (fija)
Altura regulable	No
Estructura	Metal (acero) con recubrimiento pintura electrostática al horno
Plataforma superior	Placa metálica plana para apoyar/fijar monitor
Columna	Tubo central 16 cm de ancho
Base	5 radios para alta estabilidad
Ruedas	5 giratorias 360° - 2 con freno de pedal; banda no marcante
Manilla de traslado	Empuñadura de goma estriada para mejor agarre
Canasto lateral	Malla metálica soldada
Dimensiones del canasto	30 (ancho) × 16 (alto) × 10,5 (largo) cm
Capacidad útil del canasto	~5,0 L (aprox. 30×16×10,5 cm)
Compatibilidad	Monitores de signos vitales y multiparámetros de distintas marcas (bandeja universal)
Peso neto producto	8,1 Kg
Procedencia	Chile
Marca	RescateLife
Garantía	12 meses




MUEBLES CLÍNICOS

CARRO PORTA MONITOR

RLPROD655

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

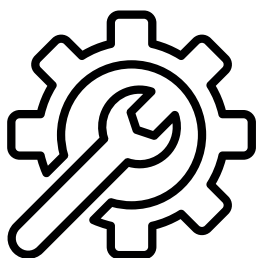

- Limpie con paño húmedo y detergente neutro; seque al terminar.
- No utilice solventes, cloro concentrado ni abrasivos sobre la pintura.
- Revise ruedas y frenos periódicamente; apriete tornillos flojos.
- Lubrique pivotes de ruedas si se percibe dureza de giro.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Evite superar la carga recomendada por el fabricante del monitor.
- Mantenga frenos activados cuando el carro esté estacionado.
- No se utilice para subir/bajar escalones ni transportar personas.
- Prevenga tropiezos manteniendo cables dentro del canasto.
- Traslade a velocidad controlada y sobre superficies niveladas.

